

長柄ヘアブラシ

【対象】

関節リウマチ、関節疾患の方 など

【特徴】

肩があがらず頭の後ろまで手が届きにくい方でも、
持ち手部分を長くすることによってブラシが届くようになります。



【材料・寸法】

材 料	寸 法	個 数
ロングブラシの柄 (お風呂洗い用ブラシ)	長さは使いやすい長さ	1本
ヘアブラシ	現寸法で使用	1本
ボルト	φ3mm 長さ20mm	2本
ナット		2個

その他：のこぎり、電動ドリル、ペンチ、ドライバー、
ヒートガン、軍手、洗面器、タオル


【作り方】

- ① ロングブラシの柄をのこぎりで使いやすい長さにカットする。
- ② やすりで写真①の切り口をきれいにする。 (写真①)
- ③ ヘアブラシの柄の穴をあける箇所 (2箇所) にしるしをつける。
(先端から、18mm 次の印は 27mm) (写真②)
- ④ ヘアブラシとロングブラシをテープで仮止めする。 (写真③)
(印がテープで隠れないように注意) 2箇所固定
- ⑤ ③でつけた印の所を電動ドリルで穴を2ヶ所あけ、
ドライバーでボルト、ナットを固定する。 (写真④)
(固定が難しければ、接着剤を使う)
- ⑥ ヒートガンで温め、ヘアブラシを使いやすい角度に曲げて
水で冷ましたら完成★ (への字を目安に) (写真⑤)


写真①



写真②

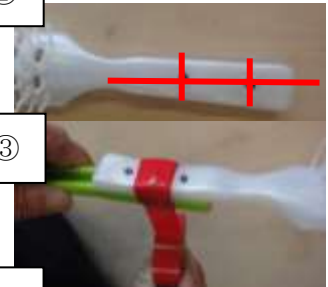

写真③

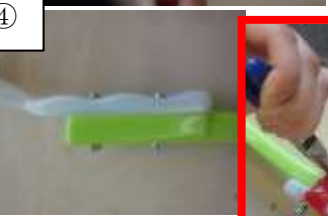

写真④



写真⑤

